

PÉČE DOMA

Kamera a náramek SOS pro klienta doma

Jeden dispečink poskytovatele: obraz z kamery, nouzové tlačítko, pád, poloha a měření zdraví – s upozorněním rodině i službě. Tři úrovně aplikace: rodina, dispečer služby a dispečer administrátor.

Stav řešení k 9. 10. 2026 · verze 3.26



Jak řešení funguje



U KLIENTA

Kamera a přívěsek

- Kamera Tapo hlásí pád, dlouhé ležení, osobu, pohyb i zvuk
- Přívěsek SOS: nouzové tlačítko, pád, baterie, poloha
- Měří tep, tlak a kyslík, sám nebo na povel



SERVER FAMICURA

Jedno místo pro data

- Každý poskytovatel má svá data v Péče doma plus
- Nahrávky šifrované na serveru nebo na Google Disku
- Čísla a telefony z Péče doma se dosazují samy



KDO TO VIDÍ

Dispečink a rodina

- Dispečer přebírá alerty, volá rodině, nahrává
- Rodina určuje, co z obrazu smí dispečink vidět
- SMS a e-mail rodině, dispečinku i službě

Kamera Tapo C220 u klienta



Tapo C220

otočná · noční vidění · Wi-Fi



Otočná hlava

Dispečer i rodina kameru natočí šipkami v obraze, domů jedním tlačítkem.



Rozpozná sama

Osobu, pohyb, překročení čáry, vstup do oblasti, zakrytí kamery i pláč.



Pád a dlouhé ležení


Analýza obrazu přidá pád a dlouhé ležení – jdou do fronty jako kritické.



Hlídá nepřetržitě

Server drží odběr událostí i bez otevřené aplikace; každá jde do logu.


Monitoring kamer – hlavní displej dispečinku

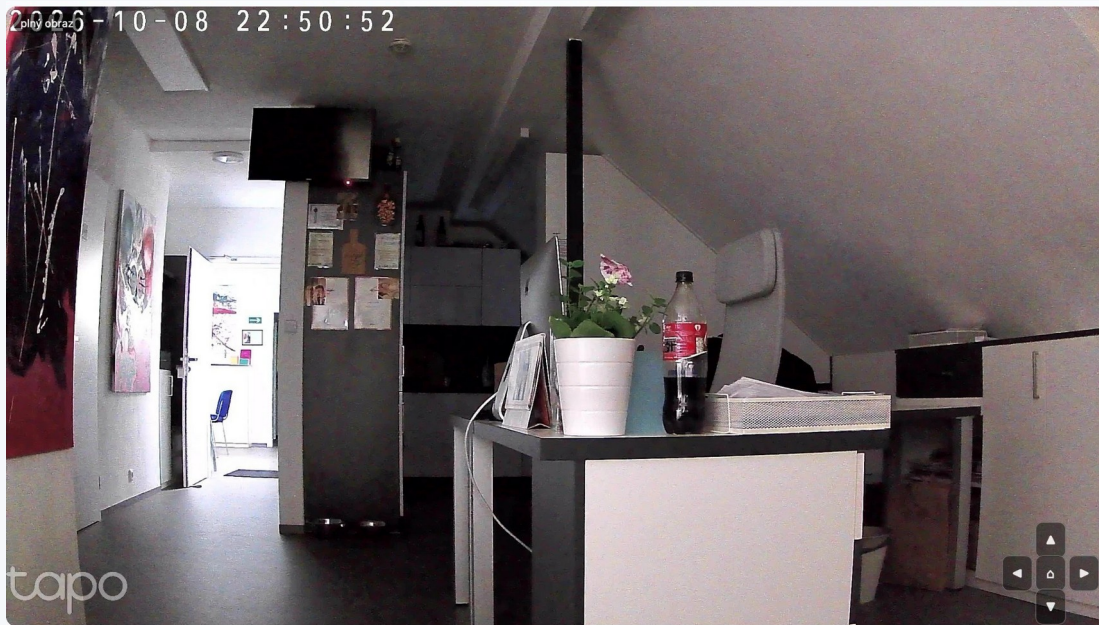

Co dispečer vidí

- Dlaždice každé kamery jen v režimu, který rodina povolila
- Fronta alertů: kritické, varování, převzetí a eskalace po 2 minutách
- Detail kamery: obraz, otáčení, poznámky, historie a nahrávky
- Žádost rodině o plný obraz, nouzový přístup při pádu nebo SOS

Náramek SOS – stav, poloha a zdraví

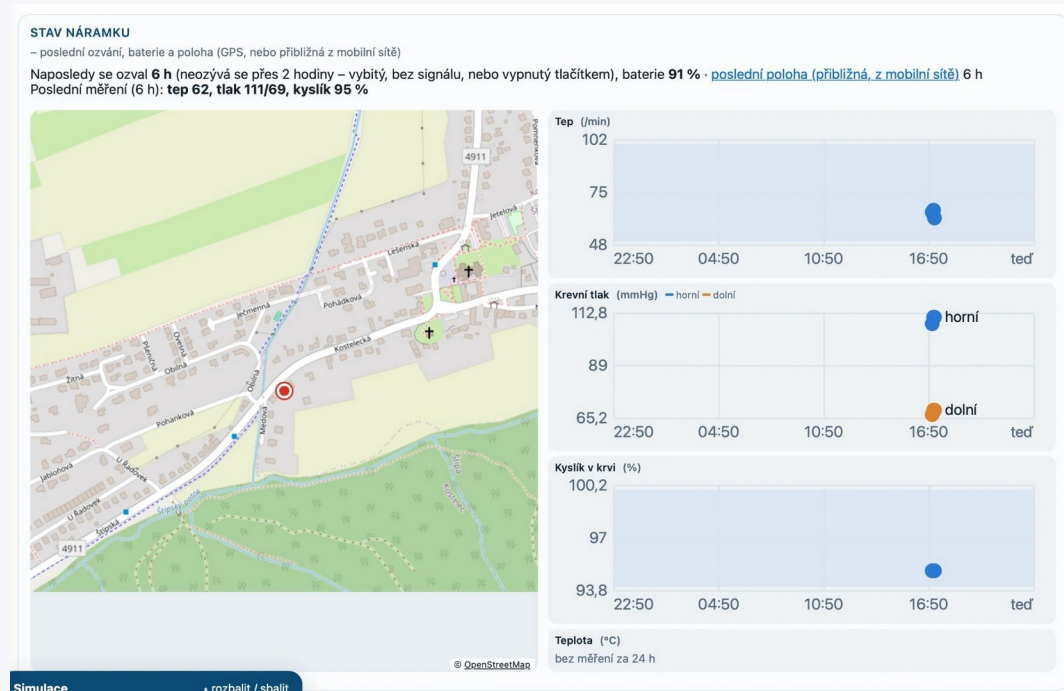

Co náramek přináší

- Nouzové tlačítko, pád a slabá baterie jdou do fronty jako alerty
- Poloha na mapě (GPS, nebo přibližná z mobilní sítě)
- Tep, tlak a kyslík: tabulka, grafy za 24 h, export do Excelu
- Čísla, která přívěsek volá, se vybírají z kontaktů kamery
- Vypnutý náramek je jasně označený, dokud se neozve

Tři úrovně aplikace



ÚROVEŇ 1

Rodina

aplikace v telefonu

- Vidí jen svou kameru: obraz, notifikace, historii
- Určuje, co smí dispečink vidět: plný, rozostřený obraz nebo drátěný model
- Schvaluje žádost o plný obraz, zapíná Klid



ÚROVEŇ 2

Dispečer služba

mobilní dispečer

- Vidí všechny kamery poskytovatele
- Jen sleduje, nic nenastavuje
- Přihlášení telefonem a heslem, pozvánka přijde SMS



ÚROVEŇ 3

Dispečer administrátor

dispečink poskytovatele

- Přebírá a uzavírá alerty, eskalace, nouzový přístup
- Nastavuje kamery, náramky, kontakty a upozornění
- Zakládá a deaktivuje účty rodiny i dispečerů

Komunikace – kdo se dozví, že se něco děje



Kontakty kamery

- Rodina: až pět lidí, jméno a mobil
- Poskytovatel: dispečink, služba, administrace
- Telefon vlastní, nebo z Péče doma / Péče doma plus
- Dvě sady e-mailů



U každé události

- Hlídat, jen v hodinách, nahrávat
- SMS komu: jednotliví lidé, dispečink, služba, administrace
- E-mail komu: sada 1, sada 2
- Kritické události mají rodinu předem



Co dál

- Teplota z náramku: dořešit s výrobcem
- Nasazení u prvních klientů Famicura
- Zpětná vazba dispečerů k alertům a nastavení
- Kontaktní telefon FamiCura v Péče doma